


## Excellence in cleaning

Geräuscharme, vollautomatische Reinigungseinheit für 3D-gedruckte Bauteile nach dem Druckprozess. Gerät mit Magnetrührtechnik und automatischem Transfer zwischen beiden Waschtanks. Per Touchscreen können verschiedene Reinigungsprogramme gewählt und angelegt werden. Diese sind speziell auf das verwendete FotoDent®-Material und den richtigen Nachbereitungszyklus abgestimmt und validiert.

### Features

- + Geräuscharmes Waschgerät für 3D-gedruckte Bauteile
- + Automatischer Transfer zwischen beiden Behältern für die Vor- und Nachreinigung
- + Magnetrührer für effiziente Reinigung
- + Geeignet für den Einsatz von IPA, Wasser & FotoClean
- + Intuitive Software und Touchdisplay
- + Abgestimmte Reinigungsprofile für die FotoDent®-Materialien
- + Optimale Ergänzung für den 3D-Drucker Phrozen Sonic CS+ – Qualified by Dreve
- + Für alle gängigen 3D-Drucker geeignet
- + Technischer Service by Dreve

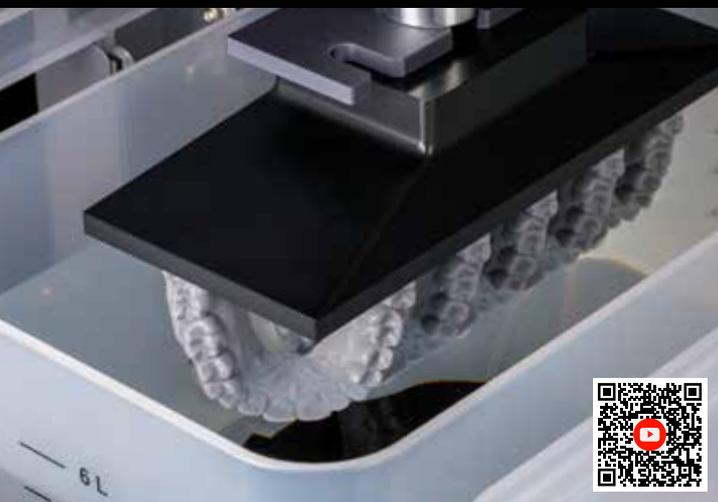

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leistung            | max. 48 W                                   |
| Spannungsversorgung | 100–240 V / 50–60 Hz, 1,5 A                 |
| Abmessungen         | 810 x 480 x 430 mm <sup>3</sup> (H x B x T) |
| Waschtankgröße      | 190 x 150 x 250 mm <sup>3</sup> (H x B x T) |
| Füllmenge Waschtank | 2 x 5,5 l                                   |
| Gewicht             | 16,5 kg                                     |